

VAPORIZADORA PARA PRUEBAS DE CINTAS

MODELO MINI-D-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Vaporizadora de laboratorio para el vaporizado de pruebas pequeñas de cintas. Usado para el desarrollo de colores en el teñido a la continua de cintas.

Posee ajuste de temperatura hasta 115°C.
El transporte de la prueba es manual, y el control de tiempo de permanencia es hecho por el operador. (Opcional: timer con alarma.)

Permite trabajar con:
- vapor saturado (100°C)
- vapor súper calentado hasta 115°C (proceso Pad Steam)

Cámara de vaporizado de acero inoxidable con inyección de vapor directo (proveído por el cliente), y calentamiento eléctrico para súper calentar el vapor.

Tamaño máximo de prueba: 5 cm x 14 cm.



DATOS TÉCNICOS - MODELO MINI-D-B

(requiere alimentación de vapor)



Tamaño máximo de prueba	5 cm x 14 cm
Temperatura de vapor	hasta 110°C (115°C)
Transporte de la prueba/soporte	manual
Tiempo de permanencia	controlado por operador
Potencia	1,3 kW
Dimensiones	L 47 x P 42 x A 52 cm
Peso líquido	aprox. 22 kg

INFORMACIONES ADICIONALES


La cámara de vapor es alimentada con vapor directo (proveído por el cliente). Súper calentamiento del vapor por medio de resistencia eléctrica para el techo con control de temperatura.

El soporte para una o dos cintas posee agujas para fijar a la prueba en sus dos puntas. En el soporte hay una tapa que cierra a la boca de la cámara cuando la prueba está en su interior.

Posee llave para accionar resistencia eléctrica para el calentamiento del vapor hasta 110 - 115°C.

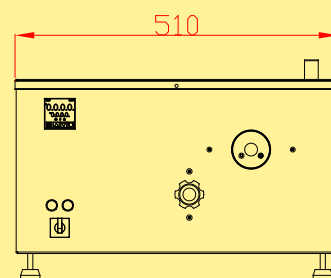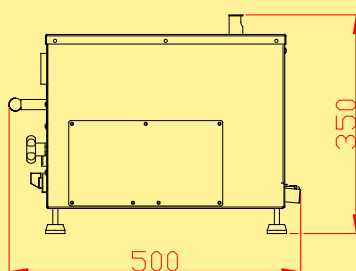

soporte con agujas para fijar a la prueba de cinta
(transporte del soporte es manual)

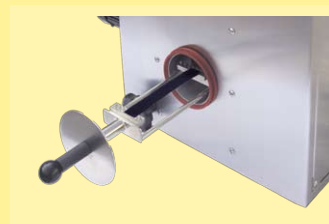**Werner Mathis AG**

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br