

MISTURADOR DE LABORATÓRIO

MODELO MST-B E MST-S-B

DESCRIÇÃO GERAL

Equipamento de laboratório para misturar, homogeneizar, cisalhar, triturar ou apenas agitar as fases de desenvolvimento e preparação de soluções, pastas ou emulsões, para a indústria de pigmentos, cosméticos, farmacêuticos, entre outros.

Misturador de laboratório de até 5000 rpm.


Trabalha tanto com haste e hélice, como com conjunto de rotor e estator.

Há diversos tamanhos de hastes e tipos de hélices para o preparo de emulsões e pastas, além de diversos conjuntos de rotor & estator.

Possui motor de 1/2 CV com controle de velocidade através de potenciômetro com display digital.

Disponível também com motor para subir e baixar o cabeçote de forma automática: modelo MST-S-B.

com rotor & estator

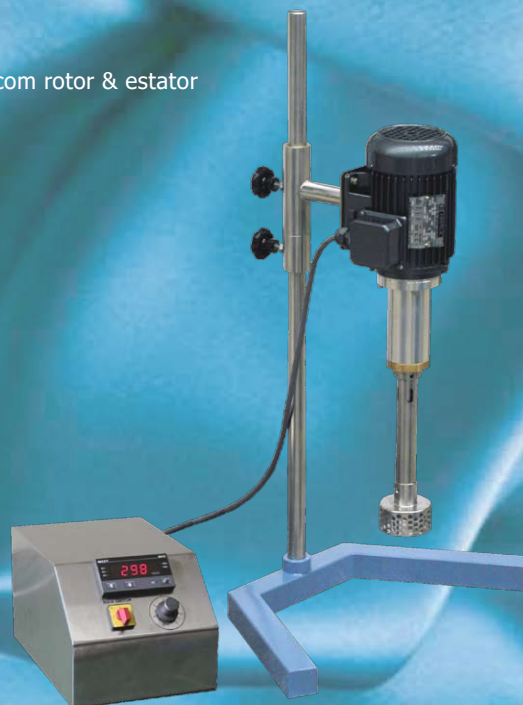

com hélice simples





DADOS TÉCNICOS - MODELO MST-B E MST-S-B

Controle de velocidade	150 - 5000 rpm	150 - 5000 rpm
Motor	1/2 CV	1/2 CV
Motor para subir/descer cabeçote	-	1/12 CV
Potência	0,5 kW	0,6 kW
Alimentação elétrica	220 V + T	220 V + T
Dimensões	L 50 x P 30 x A 80 cm	L 50 x P 48 x A 80 cm
Peso	15 kg	22 kg

Misturador com sistema de sobe-desce motorizado - modelo MST-S-B:



conjuntos de rotor & estator:

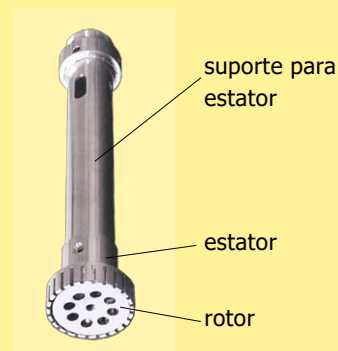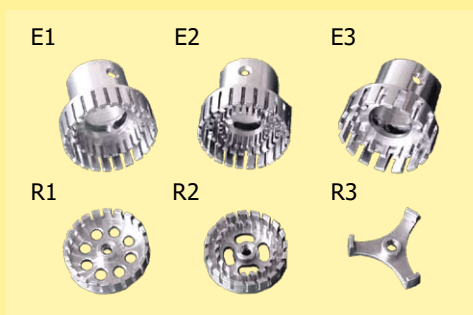


cabeçote com haste e hélice:



Hélices	Ø externo
A1	50 / 70 mm
A2	50 / 65 / 88 mm
A3	50 / 65 / 80 mm
A4	25 / 50 / 60 / 75 mm
especiais	sob consulta

hélices simples:

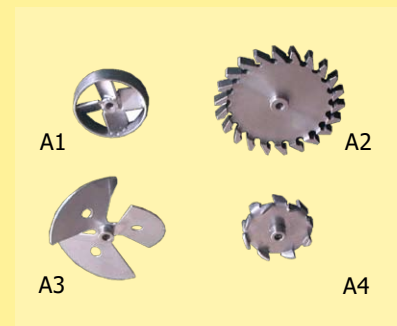

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br