

TINGIMENTOS ATÉ 135°C E TESTES DE SOLIDEZ À LAVAGEM

MODELO ALT-II

DESCRIÇÃO GERAL

Equipamento de laboratório para tingimentos de amostras têxteis em canecas de aço inoxidável (processo de esgotamento), aquecidas através de resistências infravermelhas. As canecas são de uma só peça de aço inoxidável repuxada para facilitar a limpeza (sem solda). Possui microprocessador Pico Touch Screen (com memória para 99 programas de 20 passos cada) para o controle automático do processo, com patamar, alarmes, reversão, gradiente de aquecimento e resfriamento. Opcional: dosagem de auxiliares durante o processo, e canecas para testes de Solidez à Lavagem.

DADOS TÉCNICOS

Aquecimento	5,0 kW
Rotação das canecas	30 - 60 rpm
Gradiente de temperatura	0,3 - 4,0 C/min
Dimensões	L 83 x P 70 x A 94 cm
Peso líquido	165 kg



Opcional: Dosagem



Seringa de dosagem
de 5,0 ml

ACESSÓRIOS ALT-II:



Disco com 32 canecas
de 100ml
com ou sem dosagem



Disco com 24 canecas
de 200 / 300ml
com ou sem dosagem




Disco com 8 canecas
de 500ml para
solidez à lavagem



Disco com 12 canecas
de 500ml
com ou sem dosagem



Disco com 6 canecas
de 1000ml / 1200ml ou 1400ml
com ou sem dosagem

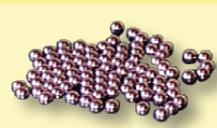

Esferas de aço inox
para testes de
solidez à lavagem



Disco com 6 canecas
de 1800ml
com ou sem dosagem



Disco com 1 caneca
de 5 litros
com ou sem dosagem

Gancho para tingimento de
fios em canecas de 100,
200, 300, 500, 1000, 1200,
1400 ou 1800ml



Corpo "morto" para
relações de banho
mais curtas

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br